

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Исследования физических факторов"

Функциональное назначение:


Исследование микроклимата, освещенности, шума, вибрации, ЭМИ, яркости. Внесение результатов испытаний с возможностью приклеивания эскизов(изображений). Автоматизированным определением соответствия нормативным документам врачом экспертом. Печать результатов испытаний. Хранение распечатанных документов в системе.

Инструкция:

[Скачать инструкцию в формате PDF](#)

Создание документа «Исследование металлолома»

Переходим в подсистему «Лабораторные исследования» – «Направления лабораторные». В открывшемся окне направлений нажимаем на кнопку «Создать на основании» и выбираем пункт «Исследование металлолома».

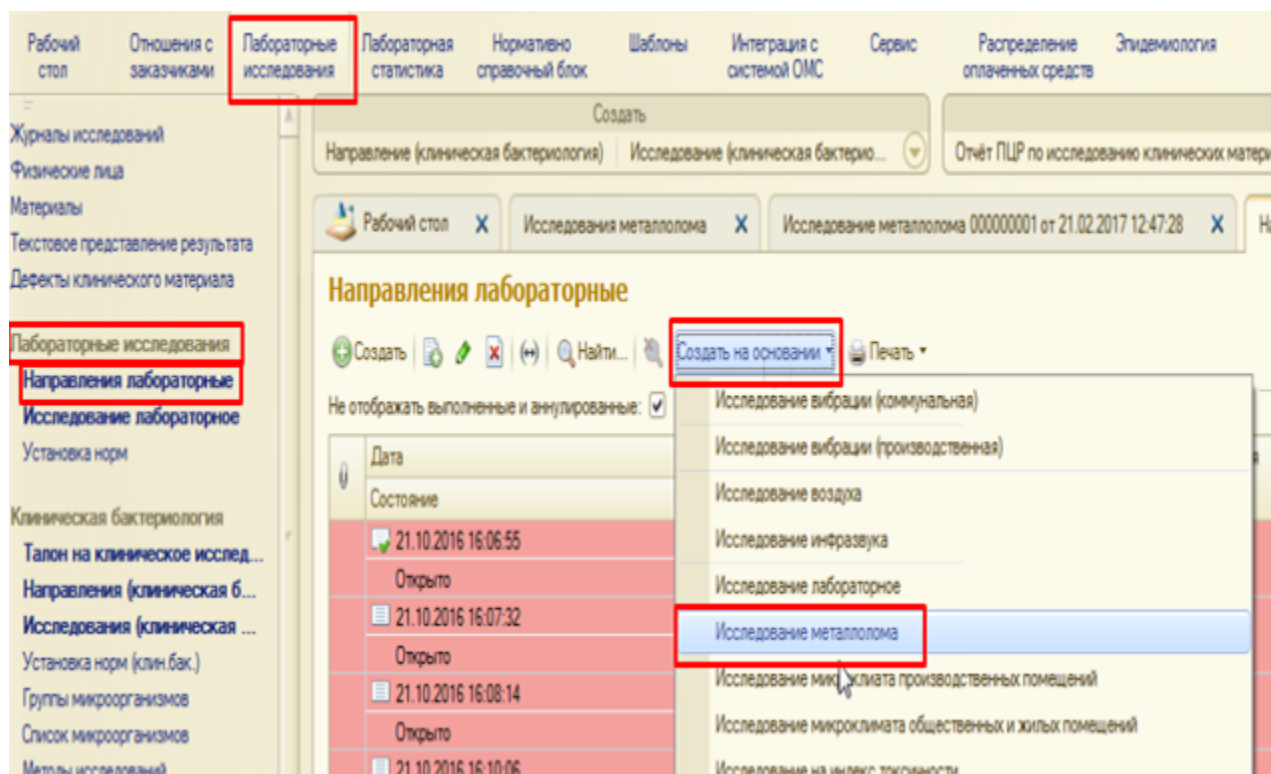

В открывшейся форме заполняем необходимые поля: «Дата исследования», «Дата результата» (точнее, дата выдачи результата) и «Рег. № в лаборатории». Если последнее поле останется пустым, то регистрационный номер будет присвоен автоматически.

Указываем «Место проведения замеров» и «Дополнительные сведения» – в этом поле перечислены данные, не вошедшие в основной протокол.

Исследование металлолома (создание)

Исследование выполнено

Номер: Дата: 13.03.2017 0:00:00

Общие сведения Результаты

Дата исследования: . . : .

Дата результата: . . : .

Направление : [Направление лабораторное 00116897 от 21.10.2016 16:28:29](#)

Номер направления: 101456

Рег.№ в лаборатории:

Тип финансирования: [Бюджет](#)

Место проведения замеров (не, ИПЦ):

ГБОУ СОШ с.Русская Васильевка м.р Кошкинский Самарской обл. с.Русская Васильевка, ул. Луговая д.1

Акт отбора проб:

Дополнительные сведения

Три нижних таблицы позволяют добавить «Участвующих в испытании (исследовании)», «Средства измерения» и «Нормативные документы». Для этого достаточно нажать кнопку со знаком + и выбрать добавляемый элемент.

Участвующие в испытании (исследовании)

Сотрудник

Средства измерения

Средство измерения

Нормативные документы

Методика

Во вкладке «Результаты» указываются «Объекты исследования» (указаны по умолчанию, но их можно изменить в случае необходимости), а также данные в таблице.

Таблица хранится в самом документе и данные в нее вносит оператор. Данные занесены в соответствии с СанПиНом 2.6.1.593 от 2000 года.

При помощи тумблера «Соответствует – Не соответствует» определяется степень соответствия объекта исследования санитарным требованиям.

Исследование металлолома (создание)

Исследование выполнено  Номер: Дата: 13.03.2017 0:00:00 

Общие сведения

Результаты

Объекты исследования:

Дозиметрический контроль партии металлолома, загруженной на транспортные средства

Соответствует

Не соответствует

 Добавить    

Точка измерения	Зарегистрированные уровни мощности дозы гамма излучения (мкЗв/ч) Сред	Зар (мк:
Гамма - фон на местности		
Порожнее транспортное средство		
Торцевая		
Боковая		
Дно		

Сохраненный документ находится по адресу: «Лабораторные исследования» – «Радиология» – «Исследования металлолома».

Список изменений в релизах:

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - ИМЦ Wiki

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:func:c48536af_347b_11e6_946e_0050569e7e0a

Last update: 2018/04/03 13:31

