

Документы "Исследование вибрации (производственная)"

Функциональное назначение:

Реквизитный состав:

Реквизит	Комментарий
Организация	<Нет пояснений>
Акт отбора проб	<Нет пояснений>
Дата и время исследования	<Нет пояснений>
Дата результата	<Нет пояснений>
Договор	<Нет пояснений>
Дополнительные сведения	<Нет пояснений>
Журнал исследований	<Нет пояснений>
Заявитель	<Нет пояснений>
Лаборатория	Лаборатория исполнитель
Место проведения замеров	<Нет пояснений>
Наименование пробы образца	<Нет пояснений>
Направление на исследование	<Нет пояснений>
Номер в журнале	Номер в журнале
Номер направления	<Нет пояснений>
Ответственный	<Нет пояснений>
При замерах присутствовали	<Нет пояснений>
Состояние	<Нет пояснений>
Тип финансирования	<Нет пояснений>
Цель измерения	<Нет пояснений>
Дата окончания измерений	<Нет пояснений>
Объекты исследования	<Нет пояснений>
Производственная вибрация	<Нет пояснений>

Инструкция:

Исследование вибрации коммунальной и производственной


В созданном исследовании во вкладке «Общие сведения» заполняем поля «Дата начала измерений», «Дата окончания измерений», «Номер в журнале», «Цель измерения», «Подписывающие», «Методики отбора», «Акты отбора проб»

The screenshot shows the 'Исследование вибрации (коммунальная) (создание)' form in the 'Общие сведения' (General Information) tab. The form includes fields for 'Номер' (Number), 'Дата' (Date) set to 02.06.2016 0:00:00, 'Дата начала измерений' (Start date of measurements), 'Дата окончания измерений' (End date of measurements), 'Направление на исследование' (Direction of research) with a value 'Направление лабораторное 00030871 от 16.03.2016 14:19:43', 'Журнал исследований' (Research journal), 'Место проведения замеров' (Measurement location), 'Дополнительные сведения' (Additional information), 'Тип финансирования' (Funding type) set to 'Бюджет' (Budget), 'При замерах присутствовали' (Were present during measurements), 'Цель измерения' (Measurement purpose), and 'Акт отбора проб' (Sampling act). Below these fields are tabs for 'Подписывающие' (Signatories) and 'Методики отбора' (Sampling methods). The 'Подписывающие' tab is active, showing a table with columns 'N', 'Сотрудник' (Employee), 'Участовал в отборе проб' (Participated in sampling), and 'Участовал в исследовании' (Participated in research).

Затем переходим на вкладку «Результаты».

The screenshot shows the same form in the 'Результаты' (Results) tab. The 'Результаты' tab is highlighted with a red rectangle. The form includes fields for 'Номер' (Number), 'Дата' (Date) set to 25.04.2016 0:00:00, and a section for 'Добавить источник физ факторов' (Add physical factor source) with a sub-section 'Источник вибрации' (Vibration source).


В поле «Место измерения» указываем место где проводились измерения вибрации из направления.

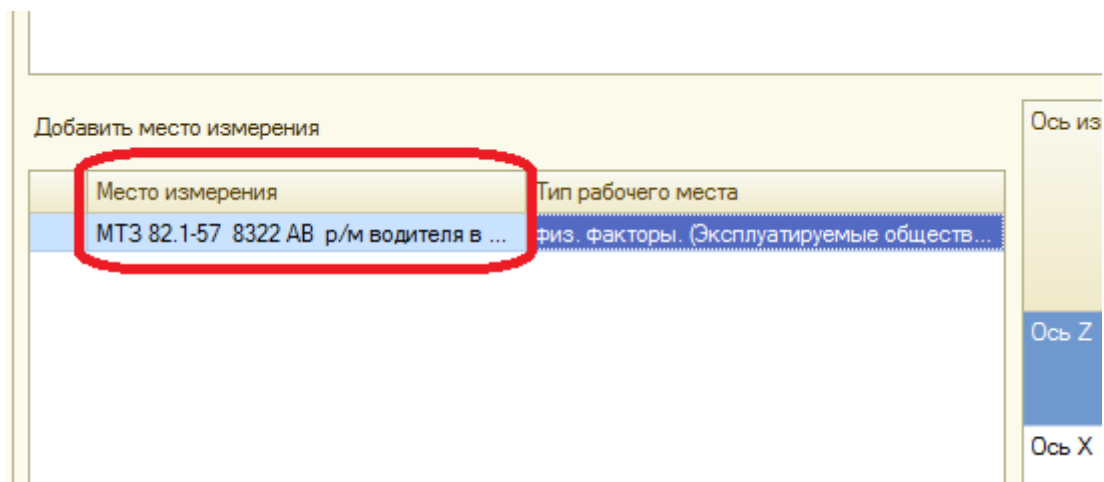

Добавляем источник физ факторов, нажав на соответствующую кнопку

Добавить источник физ факторов


В открывшемся окне указываем название источника вибрации и нажимаем «ОК».

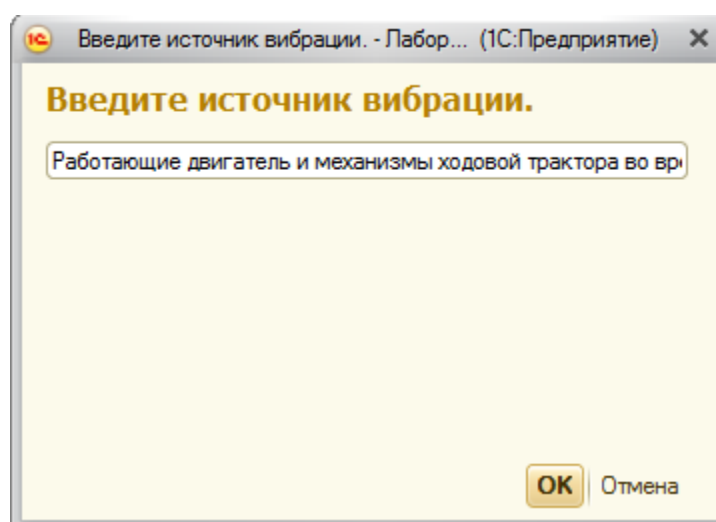


Заполняем сведения по источнику вибрации




И по месту измерения

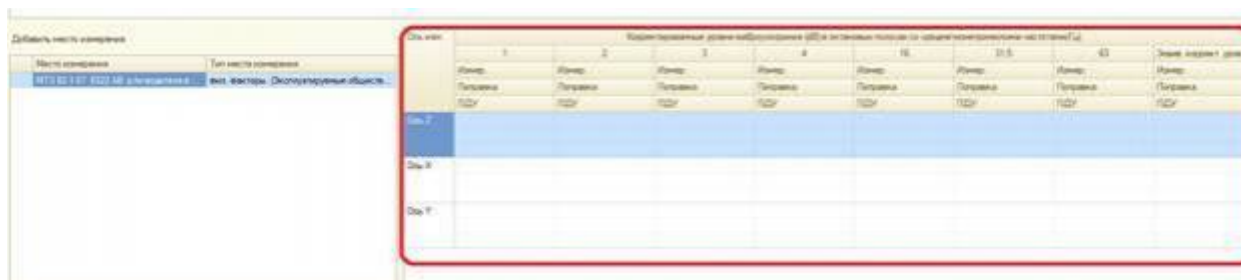

Затем переходим на вкладку «Средства измерения»

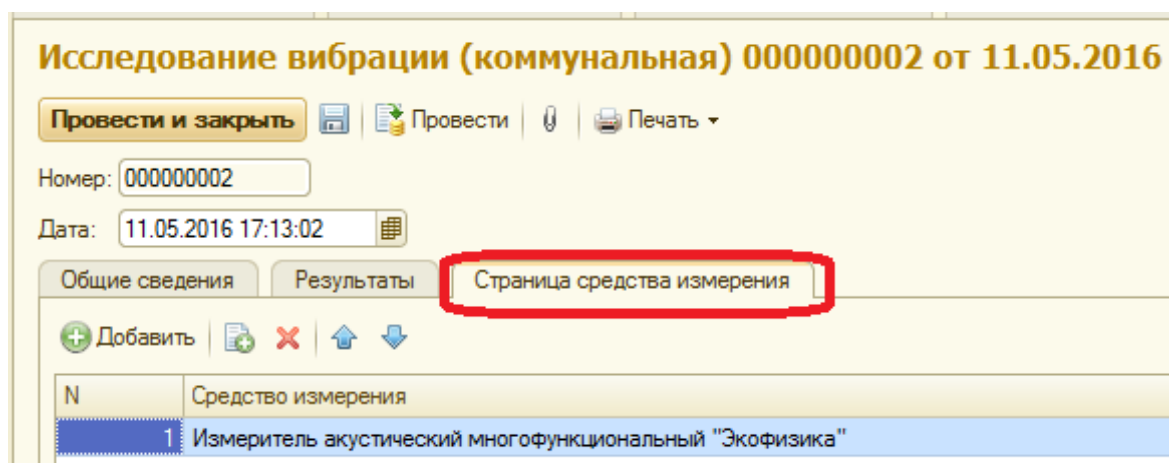

Добавляем необходимое средство измерения. Нажав на кнопку

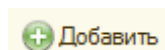


В открывшемся списке средств измерений красным отображаются те, у которых кончился срок проверки, остальные средства измерения актуальные.

Наименование	Заводск...	Проверен до	Лаборатория
BE-50	№ 92914	07.11.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
СТ-01	148509	18.12.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Анализатор шума «АССИСТЕНТ» СИУ30	№ 217015	09.09.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "Бриз-1"	00104	05.11.2014	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-33"	522	02.12.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-43"	105	05.05.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
ВЕ-метр-АТ-002	323507	07.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
весы лабораторные "ВПА-200-М"	794	07.05.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
Газоанализатор "ЭПЛАН-СО-50"	0958	20.07.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел

Если в списке средств измерения нет необходимого, то его нужно добавить.

Для этого нажимаем

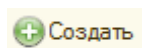

В открывшемся окне заполняем все поля и нажимаем «Записать и закрыть»

Средства измерения (создание) (1С:Предприятие)

Средства измерения (создание)

Записать и закрыть

Все действия ▾ ?

Лаборатория: Санитарно-гигиеническая лаборатория г.Сызрань

Наименование: Testo 425

Заводской №: 01767243

Номер свидетельства о проверке: 685

Организация выдавшая свидетельство: ФГБУ "Приволжское УГМС"

Проверен до: 30.11.2016 ☐ Использовать по умолчанию: ☐

Погрешность: V, м/с ±0.03+5%

Список показателей

Затем выбираем средство измерения, которое использовалось при исследовании и нажимаем «Выбрать»

Средства измерения

Выбрать Создать ☐ ☐ ☐ ☐ Найти...

Наименование	Заводск...	Проверен до	Лаборатория
⇒ "BE-50"	№ 52914	07.11.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ "СТ-01"	148508	18.12.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Анализатор шума «АССИСТЕНТ» СИУ30	№ 217015	09.09.2016	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "Брикс-1"	00104	05.11.2014	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел
⇒ Аспиратор для отбора проб воздуха "ПУ-33"	522	02.12.2015	Санитарно-гигиеническая лаборатория Советский отдел

После внесения всех данных по исследованию печатаем документ, нажав «Печать» и выбираем из выпадающего списка «Печать вибрации ...»

Исследование вибрации (коммунальная) 000000002 от 11.05.2016

Провести и закрыть ☐ Провести ☐ **Печать**

Номер: 000000002

Дата: 11.05.2016 17:13:02

Печать вибрации коммунальная

Общие сведения Результаты Страница средства измерения

☐ Добавить ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ВАЖНО !!!

После заполнения документа нажимаем «Исследование выполнено» для того, чтобы результаты увидели сотрудники оперативного отдела.

From:

<http://wiki.parus-s.ru/> - **ИМЦ Wiki**

Permanent link:

http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=okabu:lis_imts:meta:4f7a11ed_5bd2_4b5e_a29f_986bfcddb2bd 

Last update: **2016/09/02 08:01**